





Pansement absorbant, adhésif, semi-perméable


- pansement absorbant auto-adhésif « tout en un »
- comme pansement primaire ou secondaire
- plaies sèches ou exsudatives
- le film semi-perméable maintient un milieu humide et protège la plaie de l'eau et des bactéries

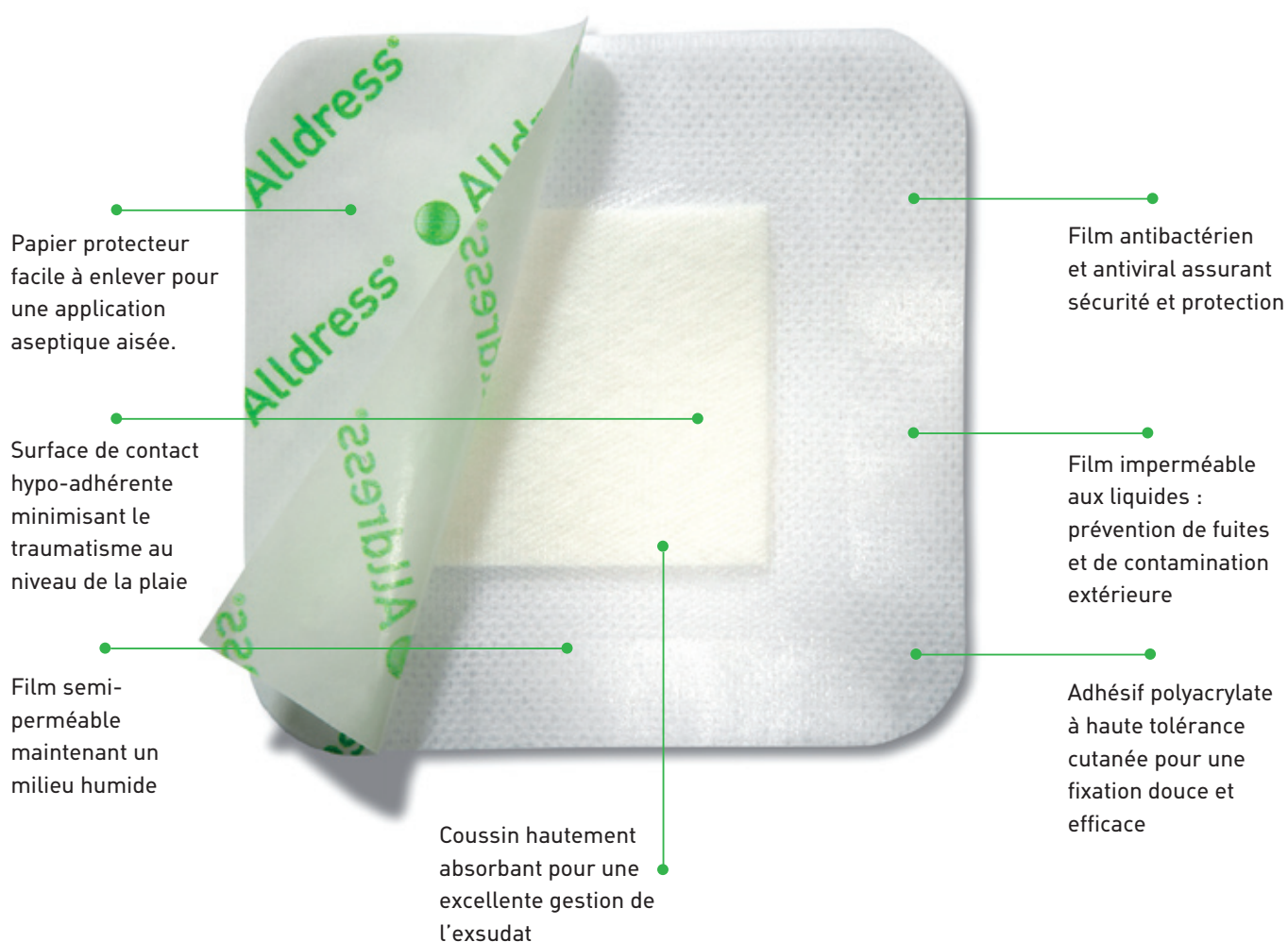


Mode d'emploi

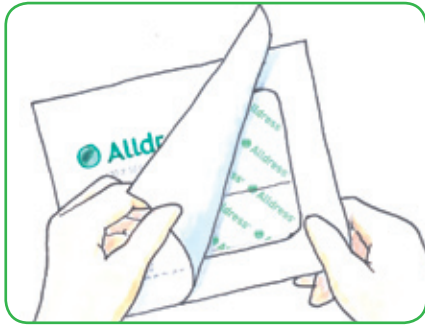

Retirez le pansement de son emballage

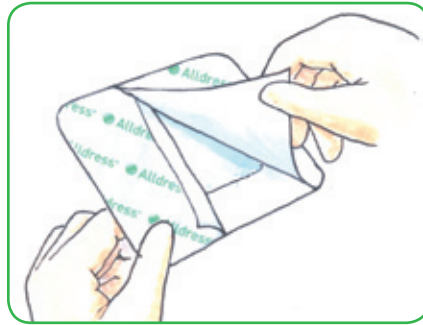

Enlevez l'un des papiers protecteurs afin d'exposer la surface adhésive et de permettre une première fixation du pansement.

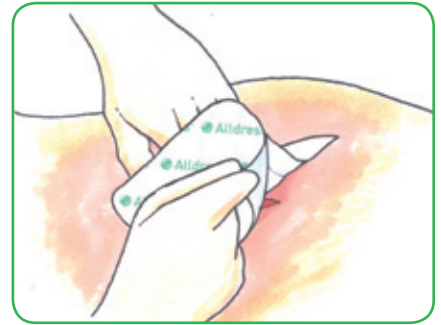

Appliquez Alldress® sur la peau et ôtez le second papier protecteur. Lissez bien le bord adhésif pour assurer une adhérence parfaite. Ne tirez pas sur le pansement lors de l'application.

Mode d'action d'Alldress®

Alldress® présente une surface de contact hypo-adhérente. Le coussin absorbe l'exsudat et minimise le risque de macération sur la peau péri-lésionnelle.

L'adhésif aqueux permet une fixation sûre tout en respectant la peau.

Le film semi-perméable maintient un milieu humide et protège en même temps la plaie et son environnement des impuretés et bactéries, tout en empêchant les exsudats de la plaie de traverser le pansement.

La surface lisse réduit le frottement avec les vêtements et les draps de lit ainsi que le risque d'abîmer le pansement.

Avantages d'Alldress®

- La surface de contact hypo-adhérente minimise le risque d'adhérence à la plaie
- Alldress® maintient un milieu humide dans la plaie
- Alldress® minimise le risque de macération
- Douches autorisées
- Protège la plaie de l'eau et de toute contamination extérieure
- Le papier protecteur facile à enlever permet une application aseptique aisée
- Adhésif aqueux qui respecte la peau
- Grand pouvoir absorbant



Domaines d'utilisation

Alldress® peut être utilisé pour une multitude de plaies faiblement à modérément exsudatives :

- comme pansement primaire pour les plaies ouvertes ou fermées
 - ulcères veineux ou diabétiques, les escarres
 - incisions chirurgicales
 - lacérations
 - brûlures superficielles.
- comme pansement secondaire pour les plaies ouvertes, en association avec :
 - gels (ex. Hypergel® et Normlgel®),
 - compresses débridantes (ex. Mesalt®)
 - alginates (ex. Melgisorb®)

Fréquence des changements

Alldress® peut rester en place plusieurs jours en fonction de l'état de la plaie et de la peau ou de la prescription du médecin. Pour l'enlever, décollez un bord et tirez lentement dans le sens du poil.

Précautions

Ne pas utiliser Alldress® sur des plaies infectées sans avis médical.

Gamme Alldress (stérile)

Dimensions	Code CNK	N° d'art.	Conditionnement	Emb.de transport
10 x 10 cm	1457-365	265320	10 x 1 pièce	100 pièces
15 x 15 cm	1457-373	265340	10 x 1 pièce	100 pièces
15 x 20 cm	1457-381	265360	10 x 1 pièce	100 pièces